



2pro®

Total Access Disposable Propy Angle




U.S. Patent #7,104,796
U.S. Patent #7,153,133



Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
610-239-6000 • 888-670-6100 • premierdentalco.com

DFU# 55001 1123047 Rev12 JC

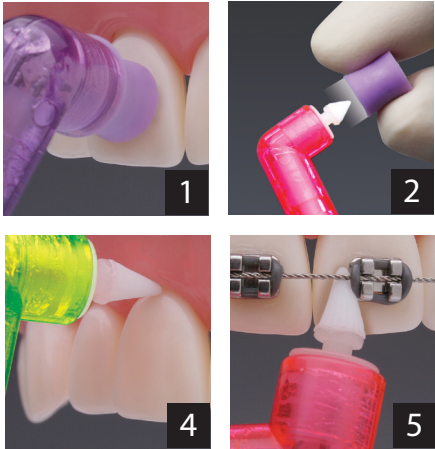

2pro®
Total Access Disposable Propy Angle

US

INSTRUCTIONS FOR USE

Description:
2pro® is a single-use disposable prophy angle uniquely designed with a prophy cup and Total Access Tip for cleaning and polishing teeth during a dental hygiene appointment. 2pro's prophy cup is ideal for cleaning and polishing facial and lingual tooth surfaces. Remove the prophy cup and use the Total Access Tip to clean and polish gingival and interproximal areas, veneer margins and around implants or orthodontic brackets. 2pro's Total Access Tip can be used to clean and polish occlusal surfaces. 2pro can be used with Enamel Pro® Prophylaxis Paste or any other prophylaxis paste. 2pro is latex free and fits a nose-cone low-speed handpiece.

Intended Use:
A single-use disposable prophy angle uniquely designed to operate a 2-in-1 technique with a prophy cup and Total Access Tip for cleaning and polishing teeth. Dental Use Only.

Indications for Use:
The prophy cup can be removed and the Total Access Tip can be used to clean and polish gingival and interproximal areas, veneer margins, and around implants or orthodontic brackets.

	Item no.	Product Specifications		Item no.	Product Specifications
Bag of 144	5500101	Soft/Short Cup (Purple Cup)	Bag of 1,000	5510001	Soft/Short Cup (Purple Cup)
	5500102	Firm/Short Cup (Blue Cup)		5510002	Firm/Short Cup (Blue Cup)
	5500103	Soft/Long Cup (White Cup)		5510003	Soft/Long Cup (White Cup)
	5500104	Firm/Long Cup (Green Cup)		5510004	Firm/Long Cup (Green Cup)

Contraindications:
Do not use 2Pro with high-speed hand pieces (3000+ RPM)

PRECAUTIONS:

- Product is designed as a single-use, disposable device.
- Do not sterilize or re-use.
- Ensure the cup and angle is securely attached, prior to use.

Rx only, Prescription device.

WARNINGS:

- Product is designed for use on a low piece handpiece. Do Not operate 2Pro above 3000 RPM.
- Do Not ReAttach the cup after removing it from the hub of your 2Pro Disposable Propy Angle's total access tip.

ADVERSE EVENTS:

- Choking may occur from the detachment and swallowing of the disposable prophy angle or cup.

If a serious incident has occurred in relation to the device, please report the incident to the Manufacturer and/or competent authority of the Member State where the device was used.

Materials:
Cup and body are Latex-Free.

- Operating Instructions:**
1. Remove 2pro Total Access Disposable Propy Angle from packaging.
 2. Insert the shaft of 2pro into the nose-cone of your low-speed handpiece. Align the slot of the prophy angle with the guide pin on your handpiece and lock into place.
 3. Safely operate 2pro for a few seconds outside the mouth to ensure that it is attached securely to the handpiece.
 4. To polish facial and lingual tooth surfaces, use the cup on your 2pro Total Access Disposable Propy Angle. (See Image 1)
 5. To clean and polish gingival and interproximal areas, veneer margins and around implants or orthodontic brackets, remove the prophy cup and use the Total Access Tip. (See Image 2, 3, 4 & 5)
 6. To clean and polish occlusal surfaces, use the cup or Total Access Tip on your 2pro Total Access Disposable Propy Angle.
 7. Do not operate 2pro above 3,000 rpm.
 8. **Do not reattach the cup after removing it from the hub of your 2pro Total Access Disposable Propy Angle.**
 9. 2pro is designed for single-patient use. Do not sterilize or reuse.
 10. Dispose of 2pro properly after each patient use.

Storage:

- Always store in the original protective packaging.
- Store in a dry environment and protected against contamination.

Disposal:
Dispose the 2Pro Propy angle after each patient-use in accordance to CDC Guidelines for Infectious Waste and federal, state and local regulations.

For Further Information:
To obtain IFU, visit premierdentalco.com or call Premier at 610-239-6000.

Symbols:
A full explanation of symbols used on Premier® Dental packaging and literature is located at www.premierdentalco.com/symbol-glossary

Symbols	Symbol Meaning
	Date and Country of Manufacture
	Manufacturer
	Batch number
	Caution: See instructions for use
	Do Not Reuse
	Latex-Free
	See IFU on premierdentalco.com
	Medical Device
Rx ONLY	CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician
	Catalog Number
	Do not use if package is damaged

2pro®
Angle à prophylaxie dentaire jetable

FR

MODE D'EMPLOI

Description:
2pro® est un angle à prophylaxie dentaire jetable à usage unique conçu avec une coupelle à prophylaxie dentaire et un embout à accès total permettant de nettoyer et de polir les dents lors d'une session d'hygiène dentaire. La coupelle à prophylaxie dentaire 2pro est idéale pour nettoyer et polir les surfaces faciales et linguales des dents. Retirer la coupelle à prophylaxie dentaire et utiliser l'embout à accès total pour nettoyer et polir les zones gingivales et interproximales, les marges de recouvrement et les zones autour des implants ou des bagues orthodontiques. L'embout à accès total 2pro peut s'utiliser pour nettoyer et polir les surfaces occlusales. 2pro peut s'utiliser avec la pâte à prophylaxie dentaire Enamel Pro® ou toute autre pâte de ce type. 2pro est exempt de latex et s'adapte à une pièce à main à basse vitesse à cône à nez.

Mode d'emploi:
2pro est un angle à prophylaxie dentaire jetable à usage unique conçu grâce à une technique 2 en 1 avec une coupelle à prophylaxie dentaire et un embout à accès total permettant de nettoyer et de polir les dents. 2pro est exclusivement conçu pour une utilisation dentaire.

Utilisation prévue:
La coupelle à prophylaxie peut être retirée et l'embout à accès total peut être utilisé pour nettoyer et polir les zones gingivales et interproximales, les marges de recouvrement et les zones autour des implants ou des bagues orthodontiques.

	N° d'article	Spécifications du produit		N° d'article	Spécifications du produit
Sac de 144	5500101	Coupelle souple/plate (coupelle violette)	Sac de 1 000	5510001	Coupelle souple/plate (coupelle violette)
	5500102	Coupelle ferme/plate (coupelle bleue)		5510002	Coupelle ferme/plate (coupelle bleue)
	5500103	Coupelle souple/profonde (coupelle blanche)		5510003	Coupelle souple/profonde (coupelle blanche)
	5500104	Coupelle ferme/profonde (coupelle verte)		5510004	Coupelle ferme/profonde (coupelle verte)

Contre-indications:
Il n'existe aucune contre-indication connue à l'utilisation des angles à prophylaxie dentaire jetables 2pro à accès total.

PRECAUTIONS:

- Le produit est conçu comme dispositif jetable à usage unique.
- Ne pas stériliser et ne pas réutiliser le produit.
- Veiller à ce que la coupelle et l'angle soient solidement mis en place avant leur utilisation.

Rx uniquement, dispositif vendu sur ordonnance.

AVERTISSEMENTS:

- 2pro est conçu pour une utilisation sur une pièce à main à basse vitesse. Ne pas utiliser 2pro à une vitesse supérieure à 3 000 tr/mn.
- Ne pas rattacher la coupelle après l'avoir retirée de l'arbre de votre angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro à accès total.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES :

- L'étouffement peut survenir à la suite du décollement et de l'ingestion de l'angle à prophylaxie jetable ou de la coupelle.

Si un incident grave se produit en lien avec le dispositif, veuillez signaler cet incident au fabricant ou à une autorité compétente dans l'État membre où le dispositif a été utilisé.

Matériaux :
La cupule et le corps ne contiennent pas de latex.

- Instructions de fonctionnement:**
1. Retirer l'angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro à accès total de son emballage.
 2. Insérer l'arbre du 2pro dans le cône à nez de votre pièce à main à basse vitesse. Aligner l'encoche de l'angle à la broche guide de votre pièce à main et enclencher en place.
 3. Par souci de sécurité, faire tourner 2pro pendant quelques secondes hors de la bouhe pour s'assurer qu'il est bien fixé à la pièce à main.
 4. Pour polir les surfaces faciales et linguales des dents, utiliser la coupelle de votre angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro à accès total. (Voir l'Image 1)
 5. Retirer la coupelle à prophylaxie dentaire et utiliser l'embout à accès total pour nettoyer et polir les zones gingivales et interproximales, les marges de recouvrement et les zones autour des implants ou des bagues orthodontiques. (Voir Images 2, 3, 4 & 5)
 6. Utiliser la coupelle ou l'embout à accès total sur votre angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro à accès total pour et polir surfaces occlusales.
 7. Ne pas utiliser 2pro à une vitesse supérieure à 3 000 tr/mn.
 8. **Ne pas rattacher la coupelle après l'avoir retirée de l'arbre de votre angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro à accès total.**
 9. 2pro est conçu pour une utilisation unique sur le patient. Ne pas le stériliser ni le réutiliser.
 10. Jeter 2pro comme il convient après chaque utilisation sur un patient.

Entreposage :

- Toujours conserver dans l'emballage de protection d'origine.
- Entreposer dans un environnement sec et protégé contre la contamination.

Élimination :
Éliminer le contre-angle de prophylaxie 2pro après chaque utilisation sur un patient conformément aux recommandations des CDC relatives aux déchets infectieux et aux réglementations fédérales, provinciales et locales.

Pour obtenir plus d'information :
Pour obtenir une fiche signalétique, consultez le site premierdentalco.com ou composez le 610-239-6000.

Symboles:
Une explication complète des symboles utilisés sur le conditionnement Premier® Dental et la documentation sont accessibles à l'adresse www.premierdentalco.com/symbol-glossary

Symboles	Signification du symbole
	Date et pays de fabrication
	Fabricant
	Numéro de lot
	Mise en garde : Voir le mode d'emploi

	À usage unique
	Sans latex
	See IFU onVoir le mode d’emploi à premierdentalco.com
	Dispositif médical
Rx ONLY	CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician
	Numéro de catalogue
	Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

2pro® Ángulo profiláctico desechable	ES
INSTRUCCIONES DE USO	

Descripción:

2pro® es un ángulo profiláctico desechable de un único uso diseñado exclusivamente con un copa profiláctica y una punta de acceso total para la limpieza y el pulido de los dientes durante una sesión de higiene dental. La copa profiláctica del 2pro es ideal para la limpieza y el pulido de las superficies dentales faciales y linguales. Retire la copa profiláctica y utilice la punta de acceso total para limpiar y pulir áreas gingivales e interproximales, márgenes de carilla y alrededor de implantes o brackets ortodóncicos. La punta de acceso total del 2pro puede utilizarse para limpiar y pulir superficies oclusales. 2pro puede utilizarse con la pasta profiláctica Enamel Pro® o cualquier otra pasta profiláctica. 2pro no contiene látex y se ajusta a una pieza de mano dental de baja velocidad y cabezal cónico.

Uso previsto:

Un ángulo profiláctico desechable de un único uso diseñado exclusivamente para ejecutar una técnica 2 en 1 una copa profiláctica y una punta de acceso total para la limpieza y el pulido de los dientes. Para uso dental solamente.

Indicaciones de uso:

La copa profiláctica se puede retirar y la punta de acceso total se puede utilizar para limpiar y pulir áreas gingivales e interproximales, márgenes de carilla y alrededor de implantes o brackets ortodóncicos.

Número de artículo	Especificaciones del producto	Número de artículo	Especificaciones del producto
5500101	Copa blanda/corta (copa morada)	5510001	Copa blanda/corta (copa morada)
5500102	Copa firme/corta (copa azul)	5510002	Copa firme/corta (copa azul)
5500103	Copa blanda/larga (copa blanca)	5510003	Copa blanda/larga (copa blanca)
5500104	Copa firme/larga (copa verde)	5510004	Copa firme/larga (copa verde)

Contraindicaciones:

No utilice 2pro con piezas de mano de alta velocidad (300 o más r. p. m.)

PRECAUCIONES:

- El producto está diseñado como un dispositivo desechable de un solo uso.
- No esterilice ni reutilice.
- Asegúrese de que la copa y el ángulo estén conectados de forma segura, antes de usarlos.

Dispositivo solo con receta médica.

ADVERTENCIAS:

- El producto está diseñado para usarse en una pieza dental dental de baja velocidad. No opere el 2pro a más de 3000 r. p. m.
- No vuelva a acoplar la copa después de quitarla del cubo de la punta de acceso total del ángulo profiláctico desechable 2pro.

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS:

- Se puede producir asfixia si se desprende y traga la copa o el ángulo profiláctico desechable.

Si se produjo un incidente grave en relación con el dispositivo, notifique el incidente al fabricante y/o a la autoridad competente del estado miembro donde se utilizó el dispositivo.

Materiales:

La copa y el cuerpo no contienen látex.

Instrucciones de operación:

- Saque el ángulo profiláctico desechable 2pro de acceso total del paquete.
- Inserte el eje del 2pro en el cabezal cónico de la pieza de mano dental de baja velocidad. Alinee la ranura del ángulo profiláctico con el pasador guía de la pieza de mano y bloquéelo en su lugar.
- Opere con seguridad el 2pro durante unos pocos segundos fuera de la boca para verifi-car que está acoplado firmemente a la pieza de mano.
- Para pulir las superficies dentales facial y lingual, utilice la copa del ángulo profiláctico desechable 2pro de acceso total. (Ver Imagen 1)
- Para limpiar y pulir áreas gingivales e interproximales, márgenes de carilla y alrededor de implantes o brackets ortodóncicos, retire la copa profiláctica y use la punta de acceso total. (Ver imágenes 2, 3, 4 y 5)
- Para limpiar y pulir las superficies oclusales, utilice la copa o la punta de acceso total del ángulo profiláctico desechable 2pro de acceso total.
- El 2pro no debe operarse a más de 3000 r. p. m.
- No vuelva a acoplar la copa después de quitarla del cubo del ángulo profiláctico desechable 2pro de acceso total.**
- El 2pro está diseñado para usarse en un único paciente. No esterilice ni reutilice.
- Deseche el 2pro apropiadamente después de su uso en el paciente.

Almacenamiento:

- Conserve siempre el producto en el envase protector original.
- Consérvelo en un entorno seco y protegido contra la contaminación.

Eliminación:

Elimine el ángulo de profilaxis 2Pro después de cada uso en un paciente de acuerdo con las directrices para la eliminación de productos infecciosos de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) y los reglamentos federales, estatales y locales.

Para más información:

Para obtener una hoja de datos de seguridad, visite premierdentalco.com o llame al (+1) 610-239-6000

Símbolos:

Una explicación completa de los símbolos utilizados en el envasado de Premier® Dental y en la documentación se encuentra en www.premierdentalco.com/symbol-glossary

Símbolos	Significado del símbolo
	Fecha y país de fabricación
	Fabricante
	Número de lote
	Precaución: Consulte las instrucciones de uso.
	De un solo uso
	Sin látex
	Consulte las instrucciones de uso en www.premierdentalco.com
	Dispositivo médico
Rx ONLY	PRECAUCIÓN: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este producto a médicos o por prescripción facultativa.

	Número de catálogo
	No utilizar si el envase está dañado

2pro® 일회용 치면세마 앵글 (Disposable Prophy Angle)	KR
사용 지침	

제품 설명:

치위생 치료 시 치아를 세척하고 연마하는 데 사용하는 일회용 프로피 앵글인 2pro®는 프로피 컵과 토탈 액세스 팀이 달린 고유한 설계가 특징입니다. 2pro의 프로피 컵은 전면 및 후면 치아 표면을 세척 및 폴리싱하는 데 이상적입니다. 프로피 컵을 제거하고 토탈 액세스 팀을 사용하여 치은 및 치간 부위, 비니어 마진 및 임플란트 혹은 치아교정용 브라켓 주변을 세척하고 연마 하십시오. 2pro의 토탈 액세스 팀은 교합 표면의 세척 및 폴리싱에 활용할 수 있습니다. 2pro는 Enamel Pro® 프로피 페이스트 혹은 다른 프로피 페이스트 제품과 함께 사용할 수 있습니다. 2pro는 라텍스를 함유하지 않으며 노즈콘 저속드 핸드피스에 적합합니다.

용도:

치아를 세척하고 연마하는 데 사용하는 일회용 프로피 앵글인 2pro®는 프로피 컵과 토탈 액세스 팀이 장착되어 2가지 슬기를 1개의 기구로 시술할 수 있도록 고유하게 설계되었습니다. 치과 전용.

용도:

프로피 컵을 벗기고 토탈 액세스 팀을 사용하여 치은과 치간 부위, 비니어 마진, 임플란트, 치아교정용 브라켓 주변을 세척하고 연마할 수 있습니다.

품목 번호	품목 사양	품목 번호	품목 사양
5500101	연성/짧은 컵 (보라색 컵)	5510001	연성/짧은 컵 (보라색 컵)
5500102	경성/짧은 컵 (파란색 컵)	5510002	경성/짧은 컵 (파란색 컵)
5500103	연성/긴 컵 (흰색 컵)	5510003	연성/긴 컵 (흰색 컵)
5500104	경성/긴 컵 (녹색 컵)	5510004	경성/긴 컵 (녹색 컵)

금기사항:

2pro를 고속 핸드피스(3,000rpm 이상)와 함께 사용하지 마십시오

주의사항:

- 본 제품은 한 번 사용하고 폐기하는 일회용 장치로 설계되었습니다.
- 멸균하거나 재사용하지 마십시오.
- 사용하기 전에 컵과 앵글이 단단히 부착되어 있는지 확인하십시오.
- 처방 전용, 처방 기기.

경고:

- 본 제품은 저속 핸드피스에 부착하여 사용하도록 설계되었습니다. 2pro를 3,000rpm 이상 속도에서 작동하지 마십시오.
- 2pro 일회용 프로피 앵글 토탈 액세스 팀의 허브에서 컵을 벗긴 후 다시 씌우지 마십시오.

이상반응:

- 일회용 프로피 앵글 또는 컵이 분리되어 삼킬 경우 질식이 발생할 수 있습니다.

기기와 관련하여 심각한 사고가 발생한 경우, 제조사 및/또는 본 기기가 사용되는 회원국의 관할 기관에 사고를 보고하십시오.

소재:

컵과 본체에는 라텍스가 함유되어 있지 않습니다.

사용 설명:

- 2pro 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글의 포장을 벗깁니다.
- 2pro의 축을 저속 핸드피스의 노즈콘에 끼웁니다. 프로피 앵글의 슬롯을 핸드피스의 가이드핀에 정렬하여 제자리에 단단히 장착되도록 합니다.
- 임 밖에서 안전하게 몇 초간 작동해 봄으로써 2pro가 핸드피스에 제대로 장착되었는지 확인합니다.
- 치아의 안면과 설면을 연마하려면 2pro 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글의 컵을 사용합니다. (그림 1 참조)
- 치은과 치간 부위, 치관 마진, 임플란트, 치아교정용 브라켓 주변을 스케일링하고 연마하려면 프로피 컵을 벗기고 토탈 액세스 팀을 사용합니다. (그림 2, 3, 4, 5 참조)
- 교합면을 스케일링하고 연마하려면 2pro 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글의 컵 또는 토탈 액세스 팀을 사용합니다.
- 2pro를 3,000rpm 이상 속도에서 사용하지 마십시오.
- 2pro 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글의 허브에서 컵을 벗긴 후 다시 씌우지 마십시오.
- 2pro는 단일 환자용으로 설계되었습니다. 멸균하거나 재사용하지 마십시오.
- 2pro를 환자 한 명에게 올바르게 사용한 후에는 폐기하십시오.

보관:

- 항상 원래의 보호 포장에 보관하십시오.
- 건조한 환경에 보관하고 오염으로부터 보호하십시오.

폐기:

CDC 감염성 폐기물 지침 및 연방, 주 및 지역의 가이드라인에 따라 각 환자 사용 후 2pro 프로피 앵글을 폐기하십시오.

추가 정보를 원하시는 경우:

SDS나 IFU를 원하시면 www.premierdentalco.com을 방문하시거나 +1 610-239-6000번으로 Premier 에 전화하십시오.

기호:

Premier Dental 포장 및 문헌에 사용된 기호에 관한 자세한 설명은 www.premierdentalco.com/symbol-glossary에서 확인할 수 있습니다.

기호	기호 의미
	제조일자 및 국가
	제조사
	배치번호
	주의: 사용 지침 참조
	일회용
	라텍스 미함유
	사용 지침은 premierdentalco.com 참조
	의료 기기
Rx ONLY	사용 지침은 premierdentalco.com 참조
	카탈로그 번호
	포장이 손상된 경우 사용하지 마십시오