



2pro®


Total Access Disposable Propphy Angle

Disposable Propphy Angle

- FR Angle à prophylaxie dentaire jetable
- ES Ángulo profiláctico desechable
- DE Einweg-Prophylaxe-Winkelstück
- IT Innesto a contrangolo per profilassi monouso
- KR 일회용 프로피 앵글 (Disposable Propphy Angle)

 Manufacturer: Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
610-239-6000 • 888-670-6100
E-mail: info@premierdentalco.com • premierdentalco.com

U.S. Patent #7,104,796
U.S. Patent #7,153,133

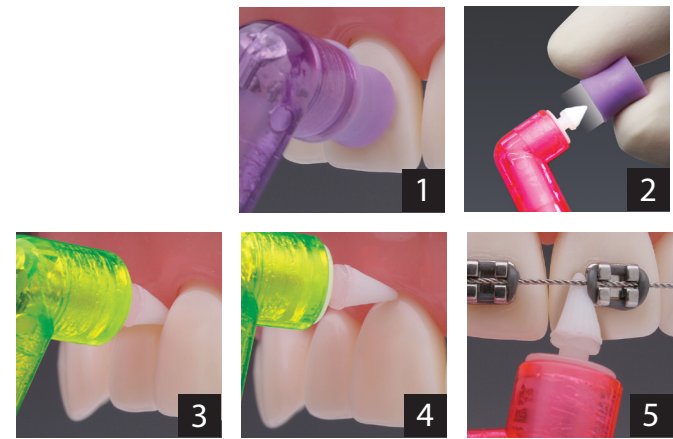

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30179 Hannover, Germany



DFU# 55001 1219027 Rev10 JC

US / UK

2pro® Total Access Disposable Propphy Angle

Description:

2pro® is a single-use disposable propphy angle uniquely designed with a propphy cup and Total Access Tip for cleaning and polishing teeth during a dental hygiene appointment. 2pro's propphy cup is ideal for cleaning and polishing facial and lingual tooth surfaces. Remove the propphy cup and use the Total Access Tip to clean and polish gingival and interproximal areas, veneer margins and around implants or orthodontic brackets. 2pro's Total Access Tip can be used to clean and polish occlusal surfaces. 2pro can be used with Enamel Pro® Propphy Paste or any other propphy paste. 2pro is latex free and fits a nose-cone low-speed handpiece.

Indications for Use:

2pro is a single-use disposable propphy angle uniquely designed with a propphy cup and Total Access Tip for cleaning and polishing teeth. 2pro is designed for dental use only.

Contraindications:

There are no known contraindications for 2pro Total Access Disposable Propphy Angles.

WARNINGS:

2pro is designed for use on a low-speed handpiece. Do not operate 2pro above 3,000 rpm. **Do not reattach the cup after removing it from the hub of your 2pro Total Access Disposable Propphy Angle.**

PRECAUTIONS:

2pro is designed as a single-use, disposable device. Do not sterilize or reuse. Dispose of 2pro properly after each patient use.

Operating Instructions:

1. Remove 2pro Total Access Disposable Propphy Angle from packaging.
2. Insert the shaft of 2pro into the nose-cone of your low-speed handpiece. Align the slot of the propphy angle with the guide pin on your handpiece and lock into place.
3. Safely operate 2pro for a few seconds outside the mouth to ensure that it is attached securely to the handpiece.
4. To polish facial and lingual tooth surfaces, use the cup on your 2pro Total Access Disposable Propphy Angle. **(See Image 1)**
5. To clean and polish gingival and interproximal areas, veneer margins and around implants or orthodontic brackets, remove the propphy cup and use the Total Access Tip. **(See Image 2, 3, 4 & 5)**
6. To clean and polish occlusal surfaces, use the cup or Total Access Tip on your 2pro Total Access Disposable Propphy Angle.
7. Do not operate 2pro above 3,000 rpm.
8. **Do not reattach the cup after removing it from the hub of your 2pro Total Access Disposable Propphy Angle.**
9. 2pro is designed for single-patient use. Do not sterilize or reuse.
10. Dispose of 2pro properly after each patient use.

REF 2pro® with Total Access Tip - Pkg 144
5500101 – 2pro® Soft/Short Cup (Purple Cup)
5500102 – 2pro® Firm/Short Cup (Blue Cup)
5500103 – 2pro® Soft/Long Cup (White Cup)
5500104 – 2pro® Firm/Long Cup (Green Cup)

REF 2pro® with Total Access Tip - Pkg 1,000
5510001 – 2pro® Soft/Short Cup (Purple Cup)
5510002 – 2pro® Firm/Short Cup (Blue Cup)
5510003 – 2pro® Soft/Long Cup (White Cup)
5510004 – 2pro® Firm/Long Cup (Green Cup)

FR

Angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro® à accès total

Description:

2pro® est un angle à prophylaxie dentaire jetable à usage unique conçu avec une coupelle à prophylaxie dentaire et un embout à accès total permettant de nettoyer et de polir les dents lors d'une session d'hygiène dentaire. La coupelle à prophylaxie dentaire 2pro est idéale pour nettoyer et polir les surfaces faciales et linguales des dents. Retirer la coupelle à prophylaxie dentaire et utiliser l'embout à accès total pour nettoyer et polir les zones gingivales et interproximales, les marges de recouvrement et les zones autour des implants ou des bagues orthodontiques. L'embout à accès total 2pro peut s'utiliser pour nettoyer et polir les surfaces occlusales. 2pro peut s'utiliser avec la pâte à prophylaxie dentaire Enamel Pro® ou toute autre pâte de ce type. 2pro est exempt de latex et s'adapte à une pièce à main à basse vitesse à cône à nez.

Mode d'emploi:

2pro est un angle à prophylaxie dentaire jetable à usage unique conçu avec une coupelle à prophylaxie dentaire et un embout à accès total permettant de nettoyer et de polir les dents. 2pro est exclusivement conçu pour une utilisation dentaire.

Contre-indications:

Il n'existe aucune contre-indication connue à l'utilisation des angles à prophylaxie dentaire jetables 2pro à accès total.

AVERTISSEMENTS:

2pro est conçu pour une utilisation sur une pièce à main à basse vitesse. Ne pas utiliser 2pro à une vitesse supérieure à 3 000 tr/mn. **Ne pas rattacher la coupelle après l'avoir retirée de l'arbre de votre angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro à accès total.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

2pro est conçu en tant que dispositif jetable à usage unique. Ne pas le stériliser ni le réutiliser. Jeter 2pro comme il convient après chaque utilisation sur un patient.

Instructions de fonctionnement:

1. Retirer l'angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro à accès total de son emballage.
2. Insérer l'arbre du 2pro dans le cône à nez de votre pièce à main à basse vitesse. Aligner l'encoche de l'angle à la broche guide de votre pièce à main et enclencher en place.
3. Par souci de sécurité, faire tourner 2pro pendant quelques secondes hors de la bouche pour s'assurer qu'il est bien fixé à la pièce à main.
4. Pour polir les surfaces faciales et linguales des dents, utiliser la coupelle de votre angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro à accès total. **(Voir l'Image 1)**
5. Retirer la coupelle à prophylaxie dentaire et utiliser l'embout à accès total pour nettoyer et polir les zones gingivales et interproximales, les marges de recouvrement et les zones autour des implants ou des bagues orthodontiques. **(Voir Images 2, 3, 4 & 5)**
6. Utiliser la coupelle ou l'embout à accès total sur votre angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro à accès total pour nettoyer les surfaces occlusales.
7. Ne pas utiliser 2pro à une vitesse supérieure à 3 000 tr/mn.
8. **Ne pas rattacher la coupelle après l'avoir retirée de l'arbre de votre angle à prophylaxie dentaire jetable 2pro à accès total.**
9. 2pro est conçu pour une utilisation unique sur le patient. Ne pas le stériliser ni le réutiliser.
10. Jeter 2pro comme il convient après chaque utilisation sur un patient.

REF 2pro® avec pointe d'accès total - Paquet de 144
5500101 – Coupelle 2pro® souple/plate (coupelle violette)
5500102 – Coupelle 2pro® ferme/plate (coupelle bleue)
5500103 – Coupelle 2pro® souple/profonde (coupelle blanche)
5500104 – Coupelle 2pro® ferme/profonde (coupelle verte)

REF 2pro® avec pointe d'accès total - Paquet de 1000
5510001 – Coupelle 2pro® souple/plate (coupelle violette)
5510002 – Coupelle 2pro® ferme/plate (coupelle bleue)
5510003 – Coupelle 2pro® souple/profonde (coupelle blanche)
5510004 – Coupelle 2pro® ferme/profonde (coupelle verte)

ES

Ángulo profiláctico desechable 2pro® de acceso total

Descripción:

2pro® es un ángulo profiláctico desechable de un único uso diseñado exclusivamente con un vasa profiláctica y una punta de acceso total para la limpieza y el pulido de los dientes durante una sesión de higiene dental. La copa profiláctica del 2pro es ideal para la limpieza y el pulido de las superficies dentales faciales y linguales. Retire la copa profiláctica y utilice la punta de acceso total para limpiar y pulir áreas gingivales e interproximales, márgenes de carilla y alrededor de implantes o brackets ortodónticos. La punta de acceso total del 2pro puede utilizarse para limpiar y pulir superficies oclusales. 2pro puede utilizarse con la pasta profiláctica Enamel Pro® o cualquier otra pasta profiláctica. 2pro no contiene látex y se ajusta a un torno dental de baja velocidad y cabezal cónico.

Indicaciones de uso:

2pro es un ángulo profiláctico desechable de un único uso diseñado exclusivamente con una copa profiláctica y una punta de acceso total para la limpieza y el pulido de los dientes. 2pro está diseñado para uso dental solamente.

Contraindicaciones:

No se conocen contraindicaciones para los ángulos profilácticos desechables 2pro de acceso total.

ADVERTENCIAS:

2pro está diseñado para usarse en un torno dental de baja velocidad. El 2pro no debe operarse a más de 3.000 r. p. m. **No vuelva a acoplar la copa después de quitarlo del cubo del ángulo profiláctico desechable 2pro de acceso total.**

PRECAUCIONES:

2pro está diseñado como instrumento desechable y para un único uso. No debe volverse a esterilizar ni utilizar. Deseche el 2pro apropiadamente después de su uso en el paciente.

Instrucciones de operación:

1. Saque el ángulo profiláctico desechable 2pro de acceso total del paquete.
2. Inserte el eje del 2pro en el cabezal cónico del torno dental de baja velocidad. Alinee la ranura del ángulo profiláctico con el pasador guía del torno y bloquéelo en su lugar.
3. Opere con seguridad el 2pro durante unos pocos segundos fuera de la boca para verificar que está acoplado firmemente al torno.
4. Para pulir las superficies dentales facial y lingual, utilice la copa del ángulo profiláctico desechable 2pro de acceso total. **(Ver Imagen 1)**
5. Para limpiar y pulir áreas gingivales e interproximales, márgenes de carilla y alrededor de implantes o brackets ortodónticos, retire la copa profiláctica y use la punta de acceso total. **(Ver imágenes 2, 3, 4 y 5)**
6. Para pulir las superficies oclusales, utilice la copa o la punta de acceso total del ángulo profiláctico desechable 2pro de acceso total.
7. El 2pro no debe operarse a más de 3.000 r. p. m.
8. **No vuelva a acoplar la copa después de quitarlo del cubo del ángulo profiláctico desechable 2pro de acceso total.**
9. El 2pro está diseñado para usarse en un único paciente. No debe volverse a esterilizar ni utilizar.
10. Deseche el 2pro apropiadamente después de su uso en el paciente.

REF 2pro® con punta de acceso total - Paq. de 144
5500101 – 2pro® Copa blanda/corta (copa morada)
5500102 – 2pro® Copa firme/corta (copa azul)
5500103 – 2pro® Copa blanda/larga (copa blanca)
5500104 – 2pro® Copa firme/larga (copa verde)

REF 2pro® con punta de acceso total - Paq. de 1,000
5510001 – 2pro® Copa blanda/corta (copa morada)
5510002 – 2pro® Copa firme/corta (copa azul)
5510003 – 2pro® Copa blanda/larga (copa blanca)
5510004 – 2pro® Copa firme/larga (copa verde)



2pro®

Total Access Disposable Prophyl Angle

Disposable Prophyl Angle

FR Angle à prophylaxie dentaire jetable

ES Ángulo profiláctico desechable

DE Einweg-Prophylaxe-Winkelstück

IT Innesto a contrangolo per profilassi monouso

KR 일회용 프로피 앵글 (Disposable Prophyl Angle)

 Manufacturer: Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
610-239-6000 • 888-670-6100
E-mail: info@premierdentalco.com • premierdentalco.com

DE 2pro® Total Access-Einweg-Prophylaxe-Winkelstück

Beschreibung:

Das 2pro® ist ein Einweg-Prophylaxe-Winkelstück in einzigartigem Design mit einem Prophylaxe-Kelch und einer Total Access-Spitze für das Reinigen und Polieren der Zähne bei einer professionellen Zahnreinigung. Der Prophylaxe-Kelch des 2pro eignet sich ideal für das Reinigen und Polieren facialer und lingualer Zahnoberflächen. Nehmen Sie den Prophylaxe-Kelch ab und benutzen Sie die Total Access-Spitze zum Reinigen und Polieren von gingivalen und interproximalen Bereichen, Veneer-Rändern und um Implantate oder orthodontische Bracketts herum. Die Total Access-Spitze des 2pro kann für das Reinigen und Polieren okklusaler Oberflächen eingesetzt werden. Das 2pro kann mit Enamel Pro® Prophyl Paste oder einer anderen Prophylaxe-Paste verwendet werden. Das 2pro ist latexfrei und passt auf ein niedertouriges Nose-Cone-Handstück.

Gebrauchsanleitung:

Das 2pro ist ein Einweg-Prophylaxe-Winkelstück in einzigartigem Design mit einem Prophylaxe-Kelch und einer Total Access-Spitze für das Reinigen und Polieren der Zähne. Das 2pro ist ausschließlich für den zahnmedizinischen Gebrauch ausgelegt.

Kontraindikationen:

Es sind keine Kontraindikationen für das 2pro Total Access-Einweg-Prophylaxe-Winkelstücke bekannt.

WARNHINWEISE:

Das 2pro ist ausschließlich für die Verwendung mit einem niedertourigen Handstück ausgelegt. Benutzen Sie das 2pro nicht bei Drehzahlen über 3.000 U/min.

Stecken Sie den Kelch nicht erneut auf das 2pro Total Access-Einweg-Prophylaxe-Winkelstück, nachdem Sie ihn einmal abgenommen haben.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Das 2pro ist ein für den einmaligen Gebrauch bestimmtes Einweg-Gerät. Sterilisieren Sie das Gerät nicht und verwenden Sie es nur einmal. Entsorgen Sie das 2pro nach jeder Patientenanwendung sachgemäß.

IT Innesto a contrangolo per profilassi monouso Total Access 2pro®

Descrizione:

2pro® è un innesto a contrangolo per profilassi monouso unico nel suo genere, poiché è stato progettato con una coppetta per profilassi e una Total Access Tip per la pulizia e la lucidatura dei denti, da eseguire durante le sedute di igiene dentale. La coppetta per profilassi di 2pro è ideale per la pulizia e la lucidatura delle superfici facciali e linguali dei denti. Rimuovere la coppetta per profilassi e utilizzare la Total Access Tip per pulire e lucidare le aree gengivali e interprossimali, i margini delle veneer e intorno agli impianti o agli attacchi ortodontici. La Total Access Tip di 2pro può essere utilizzata per pulire e lucidare le superfici occlusali. 2pro può essere utilizzato con la pasta profilattica Enamel Pro® o con qualsiasi altra pasta profilattica. 2pro è privo di lattice ed è inserito in un manipolo a bassa velocità a ogiva.

Indicazioni per l'uso:

2pro è un innesto a contrangolo per profilassi monouso unico nel suo genere, poiché è progettato con una coppetta per profilassi e una Total Access Tip per la pulizia e la lucidatura dei denti. 2pro è progettato esclusivamente per uso dentale.

Controindicazioni:

Non sono conosciute controindicazioni per gli innesti a contrangolo per profilassi monouso Total Access 2pro.

AVVERTENZE:

2pro è stato progettato per essere utilizzato su un manipolo a bassa velocità. Non utilizzare 2pro a una velocità superiore a 3.000 giri al minuto. **Non riattaccare la coppetta dopo averla estratta dal rocchetto dell'innesto a contrangolo per profilassi monouso Total Access 2pro.**

PRECAUZIONI:

2pro è progettato per essere utilizzato quale dispositivo monouso. Non sterilizzare o riutilizzare. Smaltire accuratamente il 2pro dopo averlo usato su un singolo paziente.

KR

2pro® 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글

제품 설명:

치위생 치료 시 치아를 스케일링하고 연마하는 데 사용하는 일회용 프로피 앵글인 2pro®는 프로피 컵과 토탈 액세스 팁이 달린 고유한 설계가 특징입니다. 2pro의 프로피 컵은 치아 안면과 설면의 스케일링과 연마에 최적입니다. 치은과 치간 부위, 치관 마진 및 임플란트, 치아교정용 브라켓 주변을 스케일링하고 연마하려면 프로피 컵을 벗기고 토탈 액세스 팁을 사용합니다. 2pro의 토탈 액세스 팁으로 교합면을 스케일링하고 연마할 수 있습니다. 2pro를 Enamel Pro® 프로피 페이스트 또는 다른 프로피 페이스트와 함께 사용할 수 있습니다. 2pro에는 라텍스가 첨가되지 않았으며 저속 노즈콘 핸드피스에 부착할 수 있습니다.

사용 설명:

치아를 스케일링하고 연마하는 데 사용하는 일회용 프로피 앵글인 2pro®는 프로피 컵과 토탈 액세스 팁이 달린 고유한 설계로 되어 있습니다. 2pro는 구강용으로만 사용하도록 설계되었습니다.

금기:

2pro 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글에 알려진 금기증은 없습니다.

경고:

2pro는 저속 핸드피스에 부착하여 사용하도록 설계 되었습니다. 2pro를 3,000 rpm 이상 속도에서 사용하지 마십시오. 2pro 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글의 허브에서 컵을 벗긴 후 다시 씌우지 마십시오.

주의:

2pro는 한번 사용하고 폐기하는 일회용 장치입니다. 소독하거나 재사용하지 마십시오. 2pro를 환자 한 명에게 사용한 후에는 폐기하십시오.



U.S. Patent #7,104,796
U.S. Patent #7,153,133

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Bedienungsanleitung:

- Nehmen Sie das 2pro Total Access-Einweg-Prophylaxe-Winkelstück aus der Verpackung.
- Führen Sie den Schaft des 2pro in die Öffnung Ihres niedertourigen Nose-Cone-Handstücks ein. Bringen Sie die Kerbe des Prophylaxe-Winkelstücks in die Position des Führungsstifts Ihres Handstücks und rasten Sie es ein.
- Lassen Sie das 2pro einige Sekunden außerhalb des Mundes laufen, um zu gewährleisten, dass es sicher am Handstück angebracht ist.
- Zum Polieren facialer und lingualer Zahnoberflächen, benutzen Sie den Kelch Ihres 2pro Total Access-Einweg-Prophylaxe-Winkelstücks. **(Siehe Bild 1)**
- Zum Reinigen und Polieren von gingivalen und interproximalen Bereichen, Veneer-Rändern und Bereichen um Implantate oder orthodontische Bracketts herum, nehmen Sie den Prophylaxe-Kelch ab und benutzen die Total Access-Spitze. **(Siehe Bild 2, 3, 4 und 5)**
- Zum Reinigen und Polieren von okklusalen Zahnoberflächen, benutzen Sie den Kelch oder die Total Access-Spitze Ihres 2pro Total Access-Einweg-Prophylaxe-Winkelstücks.
- Benutzen Sie das 2pro nicht bei Drehzahlen über 3.000 U/min.
- Stecken Sie den Kelch nicht erneut auf das 2pro Total Access-Einweg-Prophylaxe-Winkelstück, nachdem Sie ihn einmal abgenommen haben.**
- Für jeden Patienten muss ein neues 2pro verwendet werden. Sterilisieren Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es nur einmal.
- Entsorgen Sie das 2pro nach jeder Patientenanwendung sachgemäß.

REF 2pro® – die Spitze mit vollem Zugang, 144 Stück Packung
5500101 – 2pro® Weicher/Kurzer Kelch (Violetter Kelch)
5500102 – 2pro® Fester/Kurzer Kelch (Blauer Kelch)
5500103 – 2pro® Weicher/Langer Kelch (Weißer Kelch)
5500104 – 2pro® Fester/Langer Kelch (Grüner Kelch)

REF 2pro® – die Spitze mit vollem Zugang, 1.000 Stück Packung
5510001 – 2pro® Weicher/Kurzer Kelch (Violetter Kelch)
5510002 – 2pro® Fester/Kurzer Kelch (Blauer Kelch)
5510003 – 2pro® Weicher/Langer Kelch (Weißer Kelch)
5510004 – 2pro® Fester/Langer Kelch (Grüner Kelch)

Istruzioni sul funzionamento:

- Estrarre l'innesto a contrangolo per profilassi monouso Total Access 2pro dall'imballaggio.
- Inserire l'asta del 2pro nell'ogiva del manipolo a bassa velocità. Allineare la fessura dell'innesto a contrangolo per profilassi con il perno di guida del manipolo e bloccarlo in posizione.
- Attivare in sicurezza il 2pro per alcuni secondi fuori dalla bocca del paziente, al fine di accertarsi che sia effettivamente fissato al manipolo.
- Per lucidare le superfici facciali e linguali, utilizzare la coppetta sull'innesto a contrangolo per profilassi monouso Total Access 2pro. **(Vedere Immagine 1)**
- Per pulire e lucidare le aree gengivali e interprossimali, i margini delle veneer e intorno agli impianti o agli attacchi ortodontici, rimuovere la coppetta per profilassi e utilizzare la Total Access Tip. **(Vedere Immagine 2, 3, 4 e 5)**
- Per pulire e lucidare le superfici occlusali, utilizzare la coppetta o la Total Access Tip sull'innesto a contrangolo per profilassi monouso Total Access 2pro.
- Non utilizzare 2pro a una velocità superiore a 3.000 giri al minuto.
- Non riattaccare la coppetta dopo averla estratta dal rocchetto dell'innesto a contrangolo per profilassi monouso Total Access 2pro.**
- 2pro è progettato per essere monouso. Non sterilizzare o riutilizzare.
- Smaltire accuratamente il 2pro dopo averlo utilizzato su un singolo paziente.

REF 2pro® con punta di accesso totale - confezione di 144
5500101 – Coppetta morbida/corta (Coppetta viola) 2pro®
5500102 – Coppetta dura/corta (Coppetta blu) 2pro®
5500103 – Coppetta morbida/lunga (Coppetta bianca) 2pro®
5500104 – Coppetta dura/lunga (Coppetta verde) 2pro®

REF 2pro® con punta di accesso totale - confezione di 1000
5510001 – Coppetta morbida/corta (Coppetta viola) 2pro®
5510002 – Coppetta dura/corta (Coppetta blu) 2pro®
5510003 – Coppetta morbida/lunga (Coppetta bianca) 2pro®
5510004 – Coppetta dura/lunga (Coppetta verde) 2pro®

사용 설명:

- 2pro 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글의 포장을 벗깁니다.
- 2pro의 축을 저속 핸드피스의 노즈콘에 끼웁니다. 프로피 앵글의 슬롯을 핸드피스의 가이드핀에 정렬하여 제자리에 단단히 장착되도록 합니다.
- 임 밖에서 안전하게 몇 초간 작동해 봄으로써 2pro가 핸드피스에 제대로 장착되었는지 확인합니다.
- 치아의 안면과 설면을 연마하려면 2pro 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글의 컵을 사용합니다. (그림 1 참조)
- 치은과 치간 부위, 치관 마진, 임플란트, 치아교정용 브라켓 주변을 스케일링하고 연마하려면 프로피 컵을 벗기고 토탈 액세스 팁을 사용합니다. (그림 2, 3, 4, 5 참조)
- 교합면을 스케일링하고 연마하려면 2pro 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글의 컵 또는 토탈 액세스 팁을 사용합니다.
- 2pro를 3,000 rpm 이상 속도에서 사용하지 마십시오.
- 2pro 토탈 액세스 일회용 프로피 앵글의 허브에서 컵을 벗긴 후 다시 씌우지 마십시오.
- 2pro는 단일 환자용으로 설계되었습니다. 소독하거나 재사용하지 마십시오.
- 2pro를 환자 한 명에게 사용한 후에는 폐기하십시오.

REF 2pro – 1팩당 144개
5500101 – 2pro부드러운/짧은 컵(보라색 컵) – 1팩당 144개
5500102 – 2pro단단한/짧은 컵(파란색 컵) – 1팩당 144개
5500103 – 2pro부드러운/긴 컵(흰색 컵) – 1팩당 144개
5500104 – 2pro단단한/긴 컵(녹색 컵) – 1팩당 144개

REF 2pro – 1팩당 1000개
5510001 – 2pro부드러운/짧은 컵(보라색 컵) – 1팩당 1000개
5510002 – 2pro단단한/짧은 컵(파란색 컵) – 1팩당 1000개
5510003 – 2pro부드러운/긴 컵(흰색 컵) – 1팩당 1000개
5510004 – 2pro단단한/긴 컵(녹색 컵) 및 – 1팩당 1000개