



Premier® Universal Primer

Zirconia and Glass Ceramics, Metal and Composite Primer

Directions For Use

FR Mode d'emploi
ES Indicaciones de uso
DE Gebrauchsanleitung
IT Istruzioni per l'uso

TR Kullanım Talimatları
SE Bruksanvisning
KR 사용법




Manufacturer:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
(888) 670-6100 • (610) 239-6000 • premierdentalco.com

To obtain an SDS visit premierdentalco.com or call Premier at 610-239-6000.



Made in Israel.

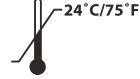

Rx ONLY



DFU#31561 • 1119058 Rev1 BJM

US / UK

Premier® Universal Primer

Zirconia and Glass Ceramics, Metal and Composite Primer

Product Description:

Premier Universal Primer is a single component universal primer that provides an enhanced adhesive surface to zirconia, glass ceramics, metal and composite materials. The primer does not require additional conditioning such as sandblasting or acid etching. Its low viscosity and excellent wetting properties promote ideal surface coverage.

Indications:

Premier Universal Primer is a prescription-only, one-step silane coupling agent intended for preparation of ceramic material such as porcelain, ceramic, hybrid ceramic or composite and zirconia restorations designed to improve adhesion to resin material prior to cementation or restoration. This primer does not require prior sandblasting or the use of an etchant.

Precautions:

- Uncured methacrylate resin may cause contact dermatitis and damage the pulp. Avoid contact with skin, eyes and soft tissue. Wash thoroughly with water after contact.

- For intraoral repairs properly isolate the restorative area with a rubber dam.
- Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- Keep out of the reach of children

Contraindications:

Do not use on patients with known sensitivity or allergy to methacrylate resins. Wash exposed area completely to remove material. If an allergic reaction is observed, consult a physician immediately and discontinue use with this patient.

Note:

Sandblasting the bonding surface of zirconia, metal and composite restorations prior to using Premier Universal Primer can be used to help achieve maximum bond strength for cases that require additional retention (e.g., short and/or over-tapered preparations).

Instructions For Use:

- Clean the internal surface of the restorations with alcohol and dry well with oil free air.
- Apply a generous amount of Premier Universal Primer onto the

- surface to be repaired with an applicator brush.
- Wait one minute.
- Dry gently for 20 seconds with oil-free air.
- Cement the restoration using a resin-based definitive cement according to manufacturer's instructions for use.

Storage:

Keep away from direct sunlight. No refrigeration required. If refrigerated, allow the bottle to reach room temperature before use. Do not freeze. Do not use after expiration date. See expiry date on the label. Shelf life is 2 years after the date of manufacturing.

To obtain SDS visit www.premierdentalco.com or call 610-239-6000.

Reorder information:

3001568 5ml Premier® Universal Primer

FR

Premier® Universal Primer

Apprêt pour zircone et vitrocéramique, métal et composites

Description du produit:

Premier Universal Primer est un apprêt universel à un élément qui fournit une surface adhésive améliorée à la zircone, à la vitrocéramique, au métal et aux matériaux composites. L'apprêt ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire comme un sablage au jet ou un mordénçage à l'acide. Sa faible viscosité et ses excellentes propriétés de mouillage favorisent une couverture de surface idéale.

Indications:

Premier Universal Primer est un agent d'amélioration de la prise à base de silane à une étape prévu pour la préparation de matériaux à base de céramique comme la porcelaine, la céramique ainsi que les restaurations hybrides en céramique ou composite et en zircone, conçu pour améliorer l'adhésion au matériau à base de résine avant le cimentage ou la restauration. Cet apprêt ne nécessite pas de sablage au jet ou d'utilisation d'un mordenceur préalable.

Précautions:

- La résine de méthacrylate non polymérisée peut causer une dermatite de contact et endommager la pulpe. Évitez tout

- contact avec la peau, les yeux et les tissus mous. Lavez-vous soigneusement avec de l'eau après un contact.
- Pour les réparations intra-orales, isolez correctement la zone de la réparation avec une digue dentaire.
 - Évitez le contact avec la peau; les résines de (méth)acrylate non polymérisées peuvent provoquer une sensibilisation cutanée chez les personnes sensibles. En cas de contact, lavez la peau avec du savon et de l'eau.
 - Gardez hors de la portée des enfants

Contre-indications:

N'utilisez pas ce produit sur des patients qui présentent une sensibilité ou une allergie connue aux résines de méthacrylate. Pour retirer les résidus, lavez toute la région exposée. Si une réaction allergique survient, consultez un médecin immédiatement et arrêtez le traitement de ce patient.

Remarque:

Le sablage au jet de la surface de collage des restaurations en zircone, en métal et en composite avant l'utilisation de Premier Universal Primer peut être utilisé pour obtenir une force de liaison maximale dans les cas nécessitant une rétention supplémentaire (p. ex., préparations courtes ou trop coniques).

Mode d'emploi:

- Nettoyez la surface interne des restaurations avec l'alcool et

- séchez bien avec de l'air sans huile.
- Appliquez une quantité généreuse d'Premier Universal Primer sur la surface à réparer avec une brosse applicatrice.
- Attendez une minute.
- Asséchez doucement pendant 20 secondes avec de l'air sans huile.
- Cimentez la restauration à l'aide d'un ciment définitif à base de résine selon le mode d'emploi du fabricant.

Entreposage:

Gardez à l'abri des rayons directs du soleil. Aucune réfrigération requise. Si la bouteille est réfrigérée, laissez-la atteindre la température ambiante avant l'utilisation. Ne pas mettre au congélateur. Ne pas utiliser après la date de péremption. Vérifiez la date de péremption inscrite sur l'étiquette. La durée de conservation est de deux ans à partir de la date de fabrication.

Pour obtenir une fiche signalétique, consultez le site www.premierdentalco.com ou composez le 610-239-6000.

Renseignements pour le réapprovisionnement:

3001568 5ml Premier® Universal Primer

ES

Premier® Universal Primer

Primer para metal, composite, vitrocerámica y zirconio

Descripción del producto:

El Premier Universal Primer es un primer universal de un solo componente que proporciona una superficie adhesiva mejorada para los materiales de zirconio, vitrocerámica, metal y composite. El imprimador no requiere acondicionamiento adicional, tal como arenado o grabado con ácido. Su baja viscosidad y sus excelentes propiedades humectantes favorecen una cobertura ideal de la superficie.

Indicaciones:

El Premier Universal Primer es un agente de acoplamiento de silano de un solo paso y de venta con receta, que está indicado para la preparación del material cerámico, como restauraciones de porcelana, cerámica, cerámica híbrida, composite o zirconio, diseñado para mejorar la adhesión al material de resina antes de la cementación o la restauración. Este imprimador no requiere un arenado previo ni el uso de un agente grabador.

Precauciones:

- La resina de metacrilato sin curar puede causar dermatitis de contacto y dañar la pulpa dental. Evite el contacto con la piel, los ojos y los tejidos blandos. Lávese a fondo con agua después del contacto.

- Para reparaciones intraorales aisle adecuadamente la zona de la restauración con un dique de goma.
- Evite el contacto con la piel; las resinas de (met)acrilato sin polimerizar pueden provocar sensibilización cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la piel con agua y jabón.
- Manténgase fuera del alcance de los niños

Contraindicaciones:

No utilice este producto en pacientes con sensibilidad o alergia conocidas a las resinas de metacrilato. Lave la zona expuesta por completo para eliminar los restos de material. Si observa una reacción alérgica, consulte con un médico inmediatamente e interrumpa el uso en ese paciente.

Nota:

Se puede utilizar el arenado de la superficie de unión en restauraciones de zirconio, metal y composite antes de la utilización del Premier Universal Primer, para ayudar a lograr la máxima fuerza de adhesión en casos que requieran retención adicional (p. ej., preparaciones cortas o trabajadas en exceso).

Instrucciones de uso:

- Limpie la superficie interna de las restauraciones con alcohol y seque bien con aire sin aceite.
- Aplique una cantidad generosa de Premier Universal Primer en la superficie a reparar con un cepillo aplicador.

- Espere un minuto.
- Seque suavemente durante 20 segundos con aire sin aceite.
- Cemente la restauración utilizando un cemento definitivo a base de resina de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante.

Almacenamiento:

Manténgase alejado de la luz solar directa. No se requiere refrigeración. Si está refrigerado, deje que el frasco alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. No congelar. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta. La vida útil es de 2 años después de la fecha de fabricación.

Para obtener una hoja de datos de seguridad, visite www.premierdentalco.com o llame al 610-239-6000.

Información para nuevos pedidos:

3001568 5ml Premier® Universal Primer

DE

Premier® Universal Primer

Zirkon- und Glaskeramik-, Metall- und Komposit-Primer

Produktbeschreibung:

Premier Universal Primer ist ein universaler Einkomponenten-Primer, der eine verbesserte Haftungsoberfläche für Zirkon, Glaskeramik, Metall und Komposit bietet. Der Primer erfordert keine zusätzliche Konditionierung wie Sandstrahlung oder Säureätzung. Seine niedrige Viskosität und hervorragenden Benetzungseigenschaften fördern eine ideale Oberflächenabdeckung.

Indikationen:

Der Premier Universal Primer ist ein verschreibungspflichtiges, einstufiges Silan-Haftmittel, das für Präparationen aus Keramikmaterial wie Porzellan, Keramik, Hybrid-Keramik oder Komposit- und Zirkonrestaurationen entworfen wurde, um die Haftung am Harzmaterial vor der Zementierung oder Restauration zu verbessern. Dieser Primer erfordert keine vorherige Sandstrahlung oder die Verwendung eines Ätzmittels.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht ausgehärtetes Methacrylatharz kann Kontaktdermatitis verursachen und die Pulpa schädigen. Kontakt mit Haut, Augen und Weichgewebe vermeiden. Nach Kontakt gründlich mit Wasser abwaschen.

- Bei intraoralen Reparaturen den restaurativen Bereich ordnungsgemäß mit einem Gummidamm isolieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut; nicht polymerisierte (Meth)Acrylatharze können bei empfindlichen Personen zur Sensibilisierung der Haut führen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Kontraindikationen:

Nicht bei Patienten mit bekannter Sensibilität oder Allergie gegenüber Methacrylatharzen verwenden. Den frei gelegten Bereich vollständig auswaschen, um alles Restmaterial zu beseitigen. Bei Feststellung einer allergischen Reaktion sofort einen Arzt hinzuziehen und das Produkt bei diesem Patienten nicht mehr einsetzen.

Hinweis:

Die Anwendung von Sandstrahlen auf der Haftoberfläche von Zirkon-, Metall- und Kompositrestaurationen vor der Aufbringung des Premier Universal Primer kann zu einer maximalen Haftfestigkeit in Situationen, die eine zusätzliche Retention erfordern (z. B. kurze und/oder zu stark verjüngte Präparationen), beitragen.

Gebrauchsanweisung:

- Reinigen Sie die interne Oberfläche der Restaurationen mit Alkohol und trocknen Sie diese gründlich mit ölfreier Luft.

- Tragen Sie mit einem Applikatorpinsel eine großzügige Menge Premier Universal Primer auf die vorzubereitende Oberfläche auf.
- Warten Sie eine Minute.
- Vorsichtig für 20 Sekunden mit ölfreier Luft trocknen.
- Zementieren Sie die Restauration mit einem Permanentzement auf Harzbasis gemäß den Gebrauchsanweisungen des Herstellers.

Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Keine Kühlung erforderlich. Falls die Flasche gekühlt ist, vor der Verwendung Zimmertemperatur erreichen lassen. Nicht einfrieren. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. Siehe Haltbarkeitsdatum auf dem Label. Die Haltbarkeitsdauer beträgt zwei Jahre nach dem Herstellungsdatum.

Das SDB erhalten Sie unter www.premierdentalco.com oder telefonisch unter +1-610 239 6000.

Nachbestellangaben:

3001568 5ml Premier® Universal Primer



Premier® Universal Primer

Zirconia and Glass Ceramics, Metal and Composite Primer

Directions For Use

FR Mode d'emploi

ES Instrucciones de uso

DE Gebrauchsanweisung

IT Istruzioni per l'uso

TR Kullanım Talimatları

SE Bruksanvisning

KR 사용 지침

IT

Premier® Universal Primer

Primer per ceramiche in zirconia e in vetro, in metallo e compositi

Descrizione del prodotto:

Il Premier Universal Primer è un componente singolo che fornisce una superficie adesiva potenziata per ceramiche in zirconia, metallo e materiali compositi. Il primer non necessita di ulteriore rifinitura come sabbatura o mordenzatura acida. La sua bassa viscosità e le sue eccellenti proprietà umettanti consentono di ricoprire la superficie in modo ottimale.

Indicazioni:

Il Premier Universal Primer è un agente di accoppiamento con silano a fase singola, soggetto a prescrizione medica, indicato per la preparazione di materiale ceramico, quale restauri in porcellana, ceramica, ceramica ibrida o in composito e in zirconia, ideato per migliorare l'adesione al materiale in resina prima della cementazione o del restauro. Questo primer non richiede sabbatura preventiva o l'uso di un mordenzante.

Precauzioni:

- La resina in metacrilato non polimerizzata può causare dermatite da contatto e lesioni della polpa. Evitare il contatto con cute, occhi e tessuti molli. Lavare accuratamente con

TR

Premier® Universal Primer

Zirkonya ve Cam Seramik, Metal ve Kompozit Astar

Ürün Açıklaması:

Premier Universal Primer, zirkonya, cam seramik, metal ve kompozit malzemelere yapışkanlığı geliştirilmiş yüzey sağlayan tek bileşenli üniversal bir astardır. Astar, kumlama veya asitle aşındırma gibi ilave şartlandırma gerektirmez. Düşük viskozitesi ve mükemmel nemlendirme özellikleri ideal yüzey kaplamasını destekler.

Endikasyonlar:

Premier Universal Primer, sementasyon veya restorasyondan önce reçine malzemesine yapışmayı iyileştirmek için tasarlanmış porselen, seramik, hibrit seramik veya kompozit ve zirkonya restorasyonlar gibi seramik malzemenin hazırlanmasına yönelik, reçeteli, tek aşamalı bir silan bağlama maddesidir. Bu astar önceden kuklamayı veya aşındırıcı kullanımını gerektirmez.

Önlemler:

- İşlem görmemiş metakrilat reçinesi kontakt dermatite neden olabilir ve pulpaya zarar verebilir. Ciltle, gözlerle ve yumuşak

SE

Premier® Universal Primer

Primer för zirkonia och glaskeramik, metall och komposit

Produktbeskrivning:

Premier Universal Primer är en universell 1-komponentsprimer som ger en förbättrad fästytta till zirconia, glaskeramik, metall och kompositmaterial. Primern kräver inte ytterligare konditionering, såsom sandblåstring eller syraetsning. Tack vare sin låga viskositet och utmärkta vätningsegenskaper främjar primern den perfekta täckningen.

Indikationer:

Premier Universal Primer är ett receptbelagt, silan-baserat ett-stegsfästmedel avsett för preparering av keramiska material såsom porslin, keramik, hybridkeramik eller komposit- och zirconiarestaureeringar med avsikt att förbättra vidhäftning till harts före cementering eller återställning. Denna primer kräver inte föregående sandblåstring eller användning av etsningsmedel.

Försiktighetsåtgärder:

- Ohärdad metakrylatharts kan orsaka kontakteksem och skada pulpan. Undvik kontakt med hud, ögon och mjukvävnad. Tvätta noggrant med vatten efter kontakt.

KR

Premier® Universal Primer

지르코니아 및 유리 세라믹, 금속 및 복합 프라이머

제품 설명:

Premier Universal Primer는 강화된 유착성 표면을 지르코니아, 유리 세라믹, 금속 및 복합 물질에 제공하는 단일 성분의 범용 프라이머입니다. 프라이머는 샌드블라스팅 또는 산 에칭 같은 추가 전처리가 필요하지 않습니다. 낮은 점도와 탁월한 습윤 속성은 이상적인 표면 흡착을 촉진합니다.

적응증:

Premier Universal Primer는 도재, 세라믹, 하이브리드 세라믹 또는 복합 및 지르코니아 수복물과 같은 세라믹 물질을 조제하기 위한 처방용, 1단계 실란 커플링 제제로서, 접착 또는 수복 전 레진 물질에 대한 부착을 개선하도록 제작되었습니다. 이 프라이머는 사전 샌드블라스팅을 하거나 부식액을 사용할 필요가 없습니다.

사전 주의사항:

- 중합되지 않은 메타크릴산 레진은 접촉성 피부염과 속질의 손상을 유발할 수 있습니다. 피부, 눈, 연조직과의 접촉을 피합니다. 접촉 후 물로 완전히 씻어내십시오.

acqua dopo il contatto.

- Per le riparazioni intraorali isolare opportunamente l'area di restauro con una diga di gomma.
- Evitare il contatto con la pelle; in persone sensibili le resine in (met)acrilato possono causare sensibilizzazione cutanea. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini

Controindicazioni:

Non usare su pazienti con sensibilità o allergia note alle resine in metacrilato. Per eliminare il materiale, lavare abbondantemente l'area esposta. Se si osserva una reazione allergica, rivolgersi immediatamente ad un medico ed interrompere l'uso con questo paziente.

Nota:

Prima di utilizzare il Premier Universal Primer è possibile eseguire una sabbatura della superficie di adesione dei restauri in zirconia, metallo e compositi, per facilitare la massima adesione nei casi che richiedono ulteriore conservazione (ad es., preparazioni brevi e/o molto affusolate).

Istruzioni per l'uso:

- Pulire la superficie interna dei restauri con alcol e asciugare bene con aria priva di olio.

- dokuyla temasından kaçının. Temastan sonra suyla iyice yıkayın.
- İntraoral onarımlar için restorasyon bölgesini lastik bir örtüyle uygun şekilde yalıtın.
- Cilt ile temasından sakının; polimerleşmemiş (met) akrilat reçineleri, duyarlı kişilerde cilt hassasiyetine neden olabilir. Temas olmasi halinde, su ve sabun ile yıkayın.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın

Kontrendikasyonlar:

Metakrilat reçinelere karşı bilinen duyarlılığı veya alerjisi olan hastalarda kullanmayın. Malzemeyi çıkarmak için uygulama alanını iyice yıkayın. Bir alerjik reaksiyon gözlemlenirse, derhal bir hekime başvurun ve bu hastada yapılan uygulamayı durdurun.

Not:

Premier Universal Primer kullanılmadan önce zirkonya, metal ve kompozit yapıştırma yüzeyinin kumlanması, ilave tutma gerektiren (örneğin kısa ve/veya konik preparatlar) durumlarda maksimum yapışma mukavemeti elde etmek için kullanılabilir.

Kullanım Talimatları:

- Restorasyonların iç yüzeyini alkolle temizleyin ve yağsız havayla iyice kurulaıın.

- Isolera området med en gummifördämning vid intraorala restaureringar.
- Undvik kontakt med huden; opolymeriserade (met) akrylathartsr kan orsaka överkänslighet i huden hos känsliga personer. I fall av kontakt: tvätta huden med tvål och vatten.
- Förvara utom räckhåll för barn.

Kontraindikationer:

Använd inte på patienter med känd överkänslighet eller allergi mot metakrylathartsr. Spola det exponerade området fullständigt för att avlägsna materialrester. Om patienten får en allergisk reaktion ska du konsultera läkare omedelbart och avbryta behandlingen.

OBS!

Sandblåstring av den bindande ytan av zirconia-, metall- och kompositrestaureeringar innan användningen av Premier Universal Primer, kan användas för att bidra till maximal bindningsstyrka i de fall som kräver extra fasthållning (t.ex. korta och/eller över-avsmalnande restaureringar).

Bruksanvisning:

- Rengör insidan av restaureringarna med alkohol och torka ordentligt med oljefri luft.

- 구강내 복구의 경우, 러버댐으로 수복 부위를 적절히 분리합니다.
- 피부 접촉을 피하십시오. 비중합화 (메트)아크릴산 레진은 취약한 사람에게서 피부 과민 반응을 유발할 수 있습니다. 접촉 시, 비누와 물로 피부를 씻으십시오.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오

금기사항:

메타크릴산 레진에 대한 알려진 민감성 또는 알레르기가 있는 환자에게는 사용하지 마십시오. 노출된 부위를 완전히 씻어 물질을 제거합니다. 알레르기 반응이 관찰되는 경우, 즉시 의사와 상담하고 이 환자에 대한 사용을 중단합니다.

유의 사항:

Premier Universal Primer를 사용하기 전에 지르코니아, 금속 및 복합 수복물의 접합 표면을 샌드블라스팅하면 추가적인 보존이 필요한 경우(예: 짧은 및/또는 겸각 조제) 최대 결합 강도를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

사용 지침:

- 알코올로 수복물의 내부 표면을 닦고 오일프리(oil free) 공기로 잘 건조시킵니다.
- 도포용 솔로 복구할 표면에 Premier Universal Primer 를 넉넉하게 도포합니다.
- 1분 동안 기다립니다.

- Applicare una notevole quantità di Premier Universal Primer sulla superficie da riparare con uno spazzolino applicatore.
- Attendere un minuto.
- Asciugare delicatamente per 20 secondi con aria priva di olio.
- Cementare il restauro utilizzando un cemento definitivo a base resinosa, secondo le istruzioni d'uso del produttore.

Conservazione:

Tenere lontano dalla luce solare diretta.

Non è richiesta la conservazione in frigorifero.

In caso di conservazione in frigorifero, attendere che la siringa raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso. Non congelare.

Non usare dopo la data di scadenza. Vedere la data di scadenza sull'etichetta.

Il periodo di conservazione è di 2 anni dalla data di produzione.

Per consultare la scheda dati di sicurezza, visitare il sito www.premierdentalco.com oppure chiamare il numero +1 610-239-6000.

Informazioni per i riordini:

3001568 5ml Premier® Universal Primer

- Onarılacak yüzey üzerine bir aplikatör fırça ile bol miktarda Premier Universal Primer uygulayın.
- Bir dakika bekleyin.
- Yağsız hava ile 20 saniye boyunca nazıkçe kurulayın.
- Üreticinin kullanım talimatlarına göre reçine bazlı tanımlayıcı çimento kullanarak restorasyonu güçlendirin.

Saklama:

Doğrudan güneş ışığına karşı koruyun.

Buzdolabında saklamak gerekli değil.

Eğer buzdolabında saklınırsa şişenin kullanmadan önce oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin. Dondurmayın.

Son kullanım tarihinden sonra kullanmayın. Etiketteki son kullanım tarihine bakın.

Raf ömrü imalat tarihinden 2 yıl sonrasdır.

SDS (Güvenlik Veri Tablosu) edinmek için www.premierdentalco.com adresine gidin veya 610-239-6000 numaralı hattı arayın.

Yeniden sipariş bilgileri:

3001568 5ml Premier® Universal Primer

- Stryk på en riklig mängd Premier Universal Primer på ytan som ska repareras med en applikatorborste.
- Vänta en minut.
- Torka försiktigt i 20 sekunder med oljefri tryckluft.
- Cementera restaureringen med ett hartsbaserat definitivt cement enligt tillverkarens bruksanvisningar.

Förvaring:

Håll borta från direkt solljus.

Ingen kylförvaring behövs.

Om flaskan förvaras i kylskåp, låt den nå rumtemperatur innan den används. Får ej frysas.

Använd inte efter utgångsdatum. Se utgångsdatum på etiketten. Hållbarhet är 2 år efter tillverkningsdatum.

Säkerhetsdatablad finns att få på www.premierdentalco.com eller genom att ringa +1 610 239 6000.

Beställningsinformation:

3001568 5ml Premier® Universal Primer

- 오일프리 공기로 20초 동안 부드럽게 건조시킵니다.
- 제조업체의 사용 지침에 따라 레진 기반 항구성 시멘트를 사용하여 수복물을 접착합니다.

보관:

직사광선을 피하십시오.

냉장은 필요하지 않습니다.

냉장 보관한 경우, 사용하기 전에 병이 실온에 도달할 때까지 놓아두십시오. 냉동 보관하지 마십시오.

유효 기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 라벨의 유효 기간을 참조하십시오. 유통 기한은 제조일로부터 2년입니다.

SDS를 원하시면 www.premierdentalco.com을 방문하시거나, 610-239-6000번으로 전화하십시오. 239 6000.

재주문 정보:

3001568 5ml Premier® Universal Primer